

Caratteristiche tecniche

- Bluetooth: 4.0
- Schermo TFT da 0,96"
- Voltaggio: DC5V
- Batteria agli ioni di litio da 90 mAh 3,7V
- Campo di utilizzo: fino a 10 metri
- Tempo di utilizzo per carica: 5-7 giorni (in condizioni normali)
- Compatibile con iOS 9.0 e Android 5.0 (e versioni successive)
- Impermeabile: IP64

Contenuto della confezione:



Manuale dell'utente



2 App: FitPro

Per godere a pieno della tua HRB-40A scannerizza il codice QR corrispondente al tuo Smartphone. Quindi scarica e installa l'app




Dopo la scansione di questo QR appariranno 3 opzioni: iOS, Android e Android senza base Google. Si prega di scaricare quello corrispondente al tuo cellulare.

2.1 Sincronizzazione

Per sincronizzare l'HRB-40A con il telefono, è necessario conoscere l'indirizzo MAC dell'orologio. Per fare ciò, vai premendo il pulsante di azione su "Altro". Premere a lungo per accedere e continuare a scorrere fino alla schermata MAC. Li devi guardare un numero di 4 cifre.

Quindi apri l'app e fai clic su "impostazioni> accoppia". Ora il telefono cercherà i dispositivi Bluetooth compatibili. NOTA: è necessario che il Bluetooth sia attivato e in modalità visibile sul telefono.

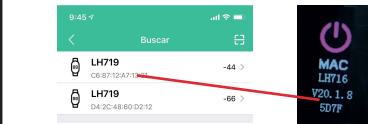

2.2 Modalità

Per passare da una modalità all'altra è sufficiente fare clic sulle icone del menu. Alcune modalità hanno diversi sottomenu; Per spostarti da uno all'altro, fai scorrere il dito sullo schermo.



NOTA: il processo di sincronizzazione richiede di aver registrato un minimo di informazioni, ad esempio dopo aver fornito un numero ragionevole di passaggi. Allo stesso modo con il monitor del sonno.

HRB-40A utilizza un software interno per il calcolo di diversi valori, in modo che possano differire da una misurazione medica professionale. I valori mostrati da questo pulsante sono indicativi.



impostazioni

Cerca guarda

Grilletto remoto

Altre impostazioni

Informazioni, registrazione e sincronizzazione

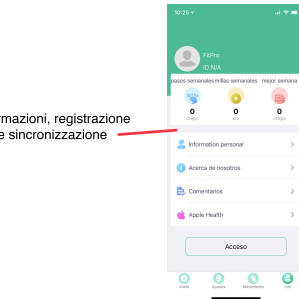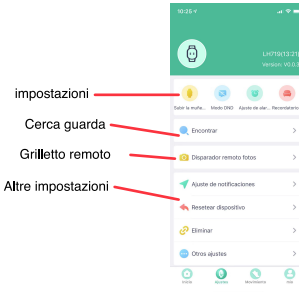

3 Modalità in HRB-40A

Premere il pulsante a sfioramento sullo schermo dell'HRB-40A per passare tra le diverse modalità disponibili. Premere per 2 secondi per accedere



4. Carico

Per caricare il tuo HRB-40A Collegare il caricabatterie regolando i terminali di ricarica nel caricabatterie in modo che entrino in contatto. Quindi collegare il connettore USB a una porta USB libera sul computer o sulla presa di corrente.

5. FAQs

1. Non riesco a sincronizzare correttamente

Assicurati che nessun altro dispositivo sia collegato tramite Bluetooth al tuo telefono. Se nel browser Bluetooth compaiono più dispositivi che potrebbero essere il tuo HRB-40A, naviga tra le schermate del menu del tuo braccialetto fino a trovare quello che identifica il MAC del braccialetto. Questo è il nome che dovrebbe apparire sul telefono e identificare un dispositivo HRB-40A unico. In alcuni telefoni la sincronizzazione deve essere eseguita dalle impostazioni Bluetooth del telefono stesso e non dall'app.

2. Non sincronizza i dati

Il braccialetto HRB-40A ha un sistema di "margine di errore" per evitare false misurazioni. Hasta non avendo raggiunto una quantità ragionevole di dati il braccialetto non consente di inviare le informazioni al telefono.

3. Penso che la misurazione non sia corretta

Il braccialetto HRB-40A incorpora un cardiofrequenzimetro, un contapassi, un tensiometro e altri contatori che funzionano utilizzando un software che interpreta i dati registrati al momento della misurazione.

4. Carico

Per caricare il tuo HRB-40A Collegare il caricabatterie regolando i terminali di ricarica nel caricabatterie in modo che entrino in contatto. Quindi collegare il connettore USB a una porta USB libera sul computer o sulla presa di corrente.

5. FAQs

1. Non riesco a sincronizzare correttamente

Assicurati che nessun altro dispositivo sia collegato tramite Bluetooth al tuo telefono. Se nel browser Bluetooth compaiono più dispositivi che potrebbero essere il tuo HRB-40A, naviga tra le schermate del menu del tuo braccialetto fino a trovare quello che identifica il MAC del braccialetto. Questo è il nome che dovrebbe apparire sul telefono e identificare un dispositivo HRB-40A unico. In alcuni telefoni la sincronizzazione deve essere eseguita dalle impostazioni Bluetooth del telefono stesso e non dall'app.

2. Non sincronizza i dati

Il braccialetto HRB-40A ha un sistema di "margine di errore" per evitare false misurazioni. Hasta non avendo raggiunto una quantità ragionevole di dati il braccialetto non consente di inviare le informazioni al telefono.

3. Penso che la misurazione non sia corretta

Il braccialetto HRB-40A incorpora un cardiofrequenzimetro, un contapassi, un tensiometro e altri contatori che funzionano utilizzando un software che interpreta i dati registrati al momento della misurazione.

A seconda della fisionomia di ciascuna persona, queste misurazioni potrebbero non essere completamente accurate poiché il braccialetto HRB-40A non è un misuratore medico. I dati ottenuti sono orientativi e servono affinché ogni utente possa avere una visione globale del proprio stato fisico.

4. Non caricare

Assicurati che i terminali del caricabatterie tocchino con le piastre di metallo del braccialetto. Verificare inoltre che il cavo USB del caricatore sia correttamente inserito in una porta USB con alimentazione. Se il problema persiste, contattaci.

5. L'app non funziona correttamente dopo l'ultimo aggiornamento

Smartek non è lo sviluppatore dell'app Wear Health. Il nostro braccialetto HRB-40A è compatibile con l'app sviluppata da una terza parte, perché non possiamo garantire che tutte le funzionalità dell'app funzionino sempre correttamente. Se hai trovato qualche tipo di problema, ti preghiamo di contattarci per supporto tecnico

6. Attiva le notifiche

Puoi decidere le notifiche delle applicazioni che desideri ricevere. Per impostazione predefinita, le notifiche sono disattivate; Per attivarli, vai su Impostazioni> Impostazioni di notifica. Qui puoi attivare o disattivare le notifiche che desideri ricevere.



Dichiarazione di conformità

SMARTEK

Indirizzo: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità la conformità del prodotto HRB-40A a cui questa dichiarazione si riferisce, con i regolamenti CE RED 2014/53 / EU e RoHS 2015/863EU dell'Unione Europea.

www.smartek.es
Servizio tecnico: sac@smartek.es

